

Компрессорный небулайзер Proson обеспечивает быструю, эффективную и надежную небулайзерную ингаляционную терапию, предназначенную для домашнего использования. Это тихий и работоспособный компрессорный небулайзер, подходящий для расширения большинства аэрозольных препаратов, назначаемых при распространенных респираторных заболеваниях. Он обеспечивает более высокий расход в литрах, более короткое время обработки и более низкий уровень шума, чем многие другие компактные компрессорные небулайзеры.

Характеристики производительности и конструкции:

- Надежное давление и поток
- Можно включать многокомпонентный распылитель.
- Маленький след
- Маленький, компактный дизайн
- Удобная ручка для переноски
- Металлические механические детали

Weight: 2.18kg



Серия/номер модели	Серия Proson / 70902
Размеры устройства	191мм*117мм*102мм
Масса	2,18 кг
Электрические требования	100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
Уровень рабочего шума	≤ 60 дБА
Максимальное давление	≥ 35 фунтов на квадратный дюйм
Свободный поток воздуха компрессора	≥ 6 л/мин
Размер частицы	2 мкм - 5 мкм
Скорость небулайзера	≥ 0,2 мл/мин
Остаточная жидкость	<0,5 мл




PORTABLE COMPRESSOR NEBULIZER

Penetrate into Bronchus & Lung 2-5µm



MICRON NEBULIZATION FINE PARTICLES

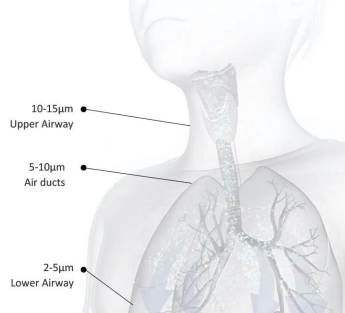

<p>3.6-4.0µm Median particle size MMAD</p>	<p>75% Percentage of effective particles</p>
---	---

QUIET ENVIRONMENT SILENT ATOMIZATION

Low noise design, easy for children to sleep



Nebulizer is suitable for auxiliary treatment of most **respiratory diseases**



1. Nebulzier machine
2. Medicine cup
3. Air tube
4. Adult mask
5. Child mask
6. Mouthpiece
7. Elastic strap

